


COLCHON "VISCOFLEX" 90X190X14 CM AD996A

Colchón viscoelástico con funda sanitaria de poliuretano (impermeable pero transpirable) para pacientes de riesgo moderado/alto viscoflex de system.

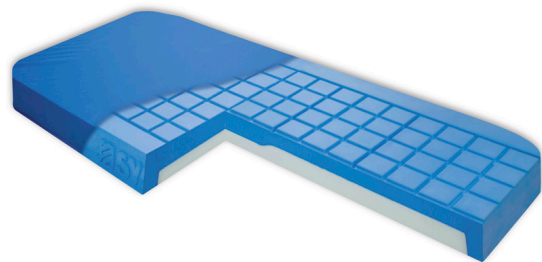

[Saber Más](#)

Referencia: 4370

Precio: €290.00

Categorías: [COLCHONES](#)

Descripción

Colchón antiescaras para prevenir la aparición de úlceras en pacientes de hasta 130 kg. Disponible en otras medidas y capacidades. Fabricado en espuma viscoelástica de 80 kg/m³ (alta densidad). Forma anatómica: Incorpora una forma anatómica en la zona del sacro (aumento del espesor de espuma viscoelástica), para incrementar la superficie de contacto y contribuyendo a la reducción de las presiones máximas. Proporciona en todo momento el espesor adecuado independientemente de la posición que se encuentre el colchón. Esquinas redondeadas: Ideal para la colocación de trapecios. Canales de circulación del aire: los canales que hay entre los bloques, permiten la circulación del aire facilitando la oxigenación de la piel.